




**BIOPTRON®**   
HYPERLIGHT THERAPY SYSTEM By Zepter Group

FILTRI

ITALIANO (IT)

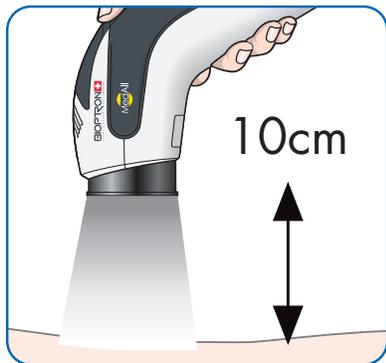

1



2



3



4

## COME SI USA?

Da una distanza di 10 cm, posizionare il dispositivo BIOPTRON con il filtro desiderato per coprire l'area che si desidera trattare (Immagine 1). Quando si trattano aree più grandi del diametro del filtro colorato, trattarle una alla volta secondo il tempo raccomandato.

## COME CAMBIARE IL FILTRO?

Con attenzione e senza forzare togliere il filtro (Immagine 2) da sostituire e inserire il filtro del colore desiderato come indicato nell'Immagine 3. Tenere l'anello esterno del filtro piuttosto che l'obiettivo.

## COME PULIRE IL FILTRO? (Immagine 4)

1. Rimuovere il filtro dal dispositivo tenendo l'anello esterno del filtro.
2. Usare un panno morbido, bagnato e senza lanugine per evitare di graffiare la superficie del vetro.
3. Asciugare il filtro con un altro panno privo di lanugine

## GARANZIA

- 5 anni se usato come previsto e se le avvertenze sono rispettate
- Questa garanzia copre i difetti di materiale e di fabbricazione
- Questa garanzia non copre i cambiamenti estetici risultanti dall'usura ordinaria che non influenzano le prestazioni del prodotto, o i danni causati dall'uso improprio del prodotto.

## AVVERTENZE

1. Non usare nessun prodotto chimico (per esempio alcool isopropilico) per pulire il lato interno o esterno della superficie di vetro e l'anello del filtro.
2. Conservare il filtro in un sacchetto protettivo per evitare l'accumulo di polvere e lo scolorimento dovuto all'esposizione alla luce del sole.
3. Il filtro è fatto di vetro fragile, quindi deve essere maneggiato con cura!
4. L'utente non è autorizzato a rimuovere la lente del filtro.



PMD-ME145-22-IT  
BIOPTRON FILTER IFU



**BIOPTRON AG**

SIHLEGGSTRASSE 23, CH-8832 WOLLERAU, SWITZERLAND  
PHONE: +41 43 888 28 00 | E-MAIL: LIGHT@BIOPTRON.COM



**WWW.BIOPTRON.COM**

ITALIANO (IT)