




BIOPTRON[®] 
HYPERLIGHT THERAPY SYSTEM By Zepter Group

FILTRENE
NORSK (NO)

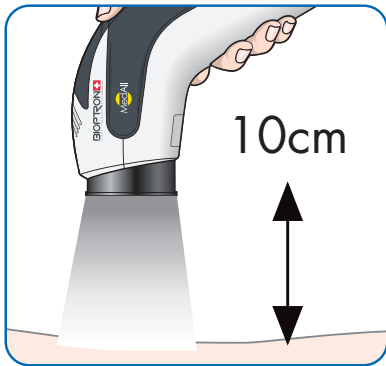

1



2



3



4

HVORDAN BRUKER MAN DETTE?

Fra en avstand på 10 cm plasserer du BIOPTRON-enheten med det valgte filteret for å dekke det området du ønsker (bilde 1) å behandle. Når du behandler områder som er større enn fargefeltets diameter, må du behandle dem del for del i henhold til anbefalt behandlingstid.

HVORDAN SKIFTER MAN FILTERET?

Forsiktig og uten å bruke makt ta ut filteret (bilde 2) som skal byttes ut, og sett inn det fargefilteret man ønsker i Bilde 3. Hold i den ytre ringen av filteret heller inne på linsen.

HVORDAN RENGJØR MAN FILTERET? (Bilde 4)

1. Fjern filteret fra utstyret ved å holde den ytre ringen på filteret.
2. Bruk en myk, fuktig, lofri klut for å unngå å ripe glassoverflaten.
3. Tørk filteret med en annen lofri klut.

GARANTI:

- 5 år hvis brukt som tiltenkt og hvis alle advarsler er fulgt
- Denne garantien dekker feil i materialer og produksjon
- Denne garantien dekker ikke estetiske endringer som kommer av vanlig slitasje og som ikke påvirker utstyrets ytelse, eller skader som resultat av feil bruk av produktet.

ADVARSLER

1. Ikke bruk kjemikalier (f.eks. isopropylalkohol) til rengjøring av indre eller ytre side av glassoverflaten og filterringen.
2. Oppbevar filteret i en beskyttende pose for å forhindre at det samler støv eller blir misfarget på grunn av at det er utsatt for sollys.
3. Filteret er laget av skjørt glass så det med behandles med stor varsomhet!
4. Brukeren har ikke lov til å fjerne filterlinsen.



PMD-ME145-22-NO
BIOPTRON FILTER IFU



BIOPTRON AG
SIHLEGGSTRASSE 23, CH-8832 WOLLERAU, SWITZERLAND
PHONE: +41 43 888 28 00 | E-MAIL: LIGHT@BIOPTRON.COM



WWW.BIOPTRON.COM

N O R S K (N O)