




BIOPTRON® 
HYPERLIGHT THERAPY SYSTEM By Zepter Group

FILTRELER

TÜRKÇE (TR)

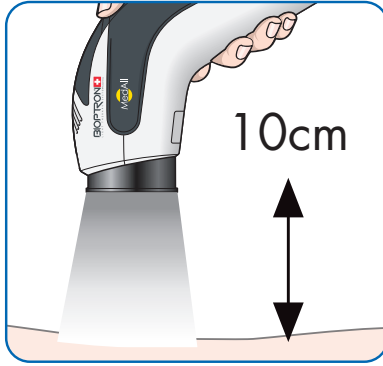

1



2



3



4

NASIL KULLANILIR?

BIOPTRON cihazını, kullanmak istediğiniz filtreyi takarak tedavi etmek istediğiniz alanı kapsayacak şekilde 10 cm mesafede (Resim 1) konumlandırın. Renkli filtrenin çapından büyük alanları tedavi ederken tavsiye edilen süre bilgisine göre her seferde belirtilen kadar alana tedavi uygulayın.

FİLTRE NASIL DEĞİŞTİRİLİR?

Değiştirilecek filtreyi dikkatlice ve zorlamadan çıkarın (Resim 2) ve istediğiniz renkteki filtreyi Resim 3'te gösterildiği gibi takın. Filtreyi lensten değil dış halkasından tutun.

FİLTRE NASIL TEMİZLENİR? (Resim 4)

1. Filtrenin dışındaki halkadan tutarak filtreyi cihazdan çıkartın.
2. Cam yüzeyin çizilmesini önlemek için tüy bırakmayan yumuşak ve nemli bir bez kullanın.
3. Tüy bırakmayan başka bir bez kullanarak filtreyi kurulayın.

GARANTİ:

- Amacına uygun kullanılması ve uyarıların dikkate alınması halinde 5 yıl
- Bu garanti, malzeme ve üretim hatalarını kapsar
- Bu garanti, olağan aşınma ve yıpranma durumundan kaynaklanan ve ürünün performansını etkilemeyen estetik değişiklikleri veya ürünün yanlış kullanımından kaynaklanan hasarları kapsamaz.

UYARILAR

1. Cam yüzeyin ve filtre halkasının içini veya dışını temizlemek için herhangi bir kimyasal (örneğin izopropil alkol) kullanmayın.
2. Toz birikmesini ve güneş ışığına maruz kalma sonucu renk bozulmasını önlemek için filtreyi koruyucu bir torba içinde muhafaza edin.
3. Filtre kırılabilir camdan üretilmiştir, bu nedenle dikkatli kullanılmalıdır!
4. Kullanıcının filtre lensini çıkarmasına izin verilmez.



PMD-ME145-22-TR
BIOPTRON FILTER IFU



BIOPTRON AG

SIHLEGGSTRASSE 23, CH-8832 WOLLERAU, SWITZERLAND
PHONE: +41 43 888 28 00 | E-MAIL: LIGHT@BIOPTRON.COM



WWW.BIOPTRON.COM

T Ü R K Ç E (T R)